


Instructions for use.
Please read carefully!



Firm hold for dentures. **Protefix**[®]

Protefix[®] Adhesive Cream with Mint

Ultra strong • Effective on wet denture • For pleasant freshness

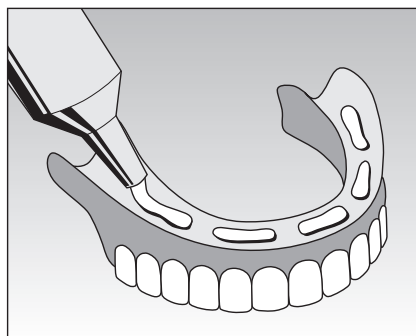

Application

Protefix[®] Adhesive Cream with Mint for dentures.

Dosage and mode of application


Clean the dentures of any residue and dab **Protefix[®] Adhesive Cream with Mint** on the wet denture (in the upper or lower denture recess that goes next to the jaw). Press the tube in the lower third near the opening. If necessary, you may also apply a line of **Protefix[®] Adhesive Cream with Mint** to the back of the upper plate. You should apply **Protefix[®] Adhesive Cream with Mint** sparingly because any excess can impair the adhesion of your denture. Then fit the denture and hold it firmly in place for a few seconds. Wait 5 minutes before eating. The adhesive cream does not noticeably change the position of the denture. After applying the cream, seal the tube carefully, taking care to ensure that the opening remains dry and clean because any ingress of liquid may cause the adhesive cream to harden. Remove any residue of adhesive cream with a cotton-wool ball soaked in edible oil. Under certain circumstances oil may appear, which has no effect whatsoever on the cream's particular good adhesive force. Please just remove the oil from the dentures.

Contraindications

Hypersensitivity to one of the ingredients.

Side effects

In isolated cases, hypersensitivity reactions in the mucous membranes of the mouth or even systemically cannot be ruled out. If you suspect the presence of a hypersensitivity reaction, please contact your dentist.

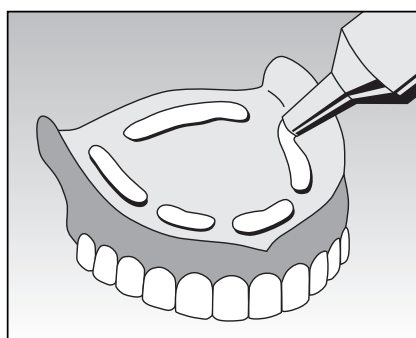

Please note the following important advice:

- To be used only on healthy mucous membranes.
- Keep out of reach of children.
- Do not use after the expiry date.

Composition

Carboxymethylcellulose, Carbomer, Paraffin, Vaseline, Silica, Wax, Peppermint oil, Spearmint oil, Menthyl lactat, Peppermint dry extract, Azorubin, Methyl-4-hydroxybenzoate. – Does not contain zinc.

Date of revision of the text: 09/2011.

Made in Germany



Producer:


Queisser
PHARMA
D-24914 Flensburg
www.queisser.com




Instrucciones para su uso.
¡Leerlas detenidamente!



Fijación segura de la prótesis. **Protifix®**

Crema Adhesiva **Protifix®** con Menta

Ultra-Fuerte • Efectiva sobre prótesis húmedas • Para una frescura agradable

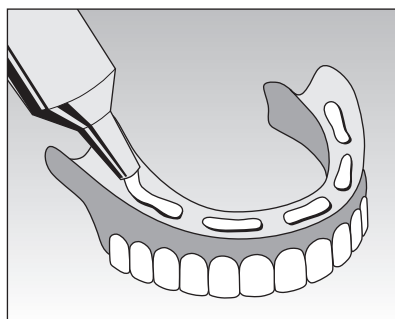

Indicación:

Crema Adhesiva Protifix® con Menta para prótesis dentales.

Dosificación y forma de aplicación:


Limpie la prótesis y la mucosa bucal eliminando cualquier residuo. Aplicar la **Crema Adhesiva Protifix® con Menta** sobre la dentadura húmeda (en el hueco de la prótesis que quedará después adherida al maxilar superior o inferior). Presione el tubo por su tercio inferior. Si es necesario, puede también aplicar una tercera línea de **Crema Adhesiva Protifix® con Menta** en la parte posterior de la prótesis superior. Dosificar moderadamente la **Crema Adhesiva Protifix® con Menta** ya que la adherencia puede disminuir si se aplican cantidades excesivas de crema. Entonces ajuste la dentadura y sosténgala firmemente en su sitio durante unos segundos. Espere 5 minutos antes de ingerir alimentos. La crema adhesiva no altera perceptiblemente la altura de la prótesis. **Después del uso, cerrar cuidadosamente el tubo, manteniendo limpia y seca la abertura, de otro modo la penetración de líquidos puede causar un endurecimiento de la crema adhesiva.** Los residuos eventuales de adhesivo pueden ser eliminados fácilmente con un algodón empapado en aceite alimentario. Bajo ciertas circunstancias, puede segregarse aceite, lo que, sin embargo, no influye en absoluto sobre la excelente capacidad de sujeción de la **Crema Adhesiva Protifix® con Menta**. Simplemente limpie el aceite que quede en la prótesis dental.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a uno de sus componentes.

Efectos secundarios:

En casos aislados es posible que se produzcan reacciones ultrasensibles de la mucosa o del organismo completo. En caso de sospecharse dicha reacción, consulte con su dentista.

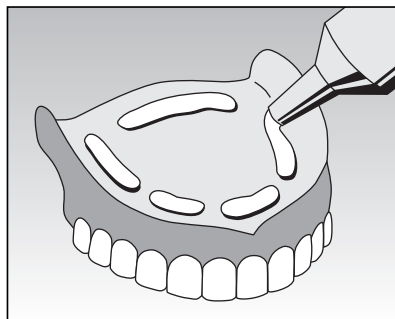

Por favor, siga las siguientes instrucciones importantes:

- Aplicar crema únicamente sobre las mucosas bucales sanas.
- Guardar el producto fuera del alcance de los niños.
- No utilizar después de cumplirse su fecha de caducidad.

Composición:

Carboximetilcelulosa, Carbomer, Parafina, Vaselina, Silica, Cera de abeja, Esencia de menta piperita, Esencia de menta verde, Lactato de mentilo, Extrato seco de menta piperita, Azorrubina, Metil-4-hidroxibenzoato. – No contiene zinc.

Esta información de uso ha sido revisada: 09/2011

Importa y Distribuye
Sunstar Americas Inc.,
Suc. Arg.
Cerrito 1054, Piso 4º,
C 1010AAV, Buenos Aires,
Argentina
Tel: 48 16 - 71 44

Hecho en Alemania



Origen e Industria Alemana


Queisser
PHARMA
D-24914 Flensburg
www.queisser.com

722117 GB/AR