


Instructions for use.
Please read carefully!



Firm hold for dentures. **Protefix®**

Protefix® Adhesive Cream with Aloe Vera

Extra strong • Effective on wet denture • Soft care for mucosa

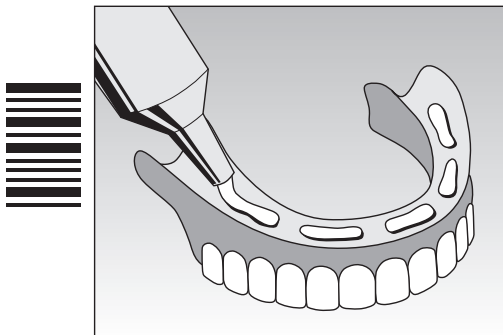

Application

Protefix® Adhesive Cream with Aloe Vera for dentures.

Dosage and mode of application


Daily dosage: up to 0.8 g adhesive cream. Clean the dentures of any residue and dab **Protefix® Adhesive Cream with Aloe Vera** on the wet denture (in the upper or lower denture recess that goes next to the jaw). Press the tube in the lower third near the opening. If necessary, you may also apply a line of **Protefix® Adhesive Cream with Aloe Vera** to the back of the upper plate. You should apply **Protefix® Adhesive Cream with Aloe Vera** sparingly because any excess can impair the adhesion of your denture. Then fit the denture and hold it firmly in place for a few seconds. Wait 5 minutes before eating. The adhesive cream does not noticeably change the position of the denture. After applying the cream, seal the tube carefully, taking care to ensure that the opening remains dry and clean because any ingress of liquid may cause the adhesive cream to harden. Remove any residue of adhesive cream with a cotton-wool ball soaked in edible oil. Under certain circumstances oil may appear, which has no effect whatsoever on the cream's particularly good adhesive force. Please just remove the oil from the dentures. The use of adhesive cream should only be temporary.

Contraindications

Hypersensitivity to one of the ingredients.

Side effects

In isolated cases, hypersensitivity reactions in the mucous membranes of the mouth or even systemically cannot be ruled out. If you suspect the presence of a hypersensitivity reaction, please contact your dentist.

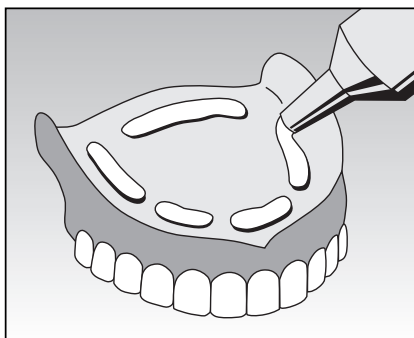

Please note the following important advice:

- To be used only on healthy mucous membranes.
- Keep out of reach of children.
- Do not use after the expiry date.

Composition

Mixture of sodium and calcium salts of the copolymer of methyl vinyl ether and maleic acid anhydride, carboxymethyl cellulose, paraffin, vaseline, Aloe Vera Barbadosis Miller, silica, menthol, azorubin, p-hydroxy-benzoic acid methyl ester. – Does not contain zinc.

Date of revision of the text: 04/2013


Instrucciones para su uso.
¡Leerlas detenidamente!



Fijación segura de la prótesis. **Protefix**[®]

Crema Adhesiva **Protefix**[®] con Aloe Vera

Extra-Fuerte • Efectiva sobre prótesis húmedas • Cuidado suave para la mucosa

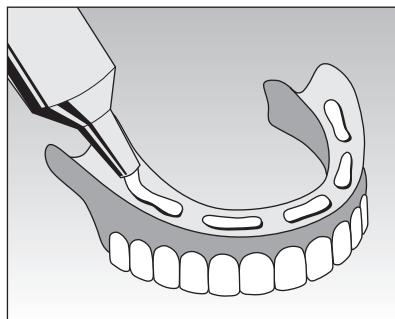

Indicación:

Crema Adhesiva **Protefix**[®] con Aloe Vera para prótesis dentales.

Dosificación y forma de aplicación:


Dosis diaria: hasta 0,8 g de crema adhesiva. Limpie la prótesis y la mucosa bucal eliminando cualquier residuo. Aplicar la **Crema Adhesiva Protefix**[®] con Aloe Vera en forma de finos trazos aislados sobre la prótesis húmeda (en el hueco de la prótesis que quedará después adherida al maxilar superior o inferior). Presione el tubo por su tercio inferior. Si es necesario, puede también aplicar una tercera línea de **Crema Adhesiva Protefix**[®] con Aloe Vera en la parte posterior de la prótesis superior. Dosificar moderadamente la **Crema Adhesiva Protefix**[®] con Aloe Vera ya que la adherencia puede disminuir si se aplican cantidades excesivas de crema. Entonces ajuste la prótesis y sosténgala firmemente en su sitio durante unos segundos. Espere 5 minutos antes de ingerir alimentos. La crema adhesiva no altera perceptiblemente la altura de la prótesis. **Después del uso, cerrar cuidadosamente el tubo, manteniendo limpia y seca la abertura, de otro modo la penetración de líquidos puede causar un endurecimiento de la crema adhesiva.** Los residuos eventuales de adhesivo pueden ser eliminados fácilmente con un algodón empapado en aceite alimentario. Bajo ciertas circunstancias, puede segregarse aceite, lo que, sin embargo, no influye en absoluto sobre la excelente capacidad de sujeción de la **Crema Adhesiva Protefix**[®] con Aloe Vera. Simplemente limpie el aceite que quede en la prótesis dental. El uso de la crema adhesiva debería ser sólo temporal.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a uno de sus componentes.

Efectos secundarios:

En casos aislados es posible que se produzcan reacciones ultrasensibles de la mucosa o del organismo completo. En caso de sospechase dicha reacción, consulte con su dentista.

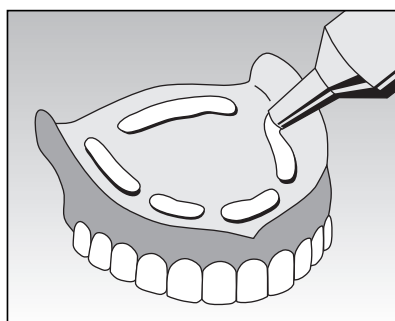

Por favor, siga las siguientes instrucciones importantes:

- Aplicar crema únicamente sobre las mucosas bucales sanas.
- Guardar el producto fuera del alcance de los niños.
- No utilizar después de cumplirse su fecha de caducidad.

Composición:

Mezcla de sales sódicas y cálcicas del copolímero metilvinil-éter y anhídrido de ácido maleico, carboximetilcelulosa, parafina, vaselina, Aloe Vera Barbados Miller, dióxido de silicio, mentol, azorubina, éster metílico de ácido p-hidroxibenzoico. – No contiene zinc.

Esta información de uso ha sido revisada: 04/2013.

Importa y Distribuye

Sunstar Americas Inc.,
Suc. Arg.
Cerrito 1054, Piso 4°,
C 1010AAV, Buenos Aires, Argentina
Tel: 48 16 - 71 44

VENTA LIBRE

D.T. Arnaldo Bucchianeri
Farmacéutico. M.N. 13056
ANMAT PM 1900-3

Distribuidor en España:

Laboratorios Distrosur, S.A.
Pol. Tecnológico nave 39
Ogijares 18151 (Granada) España
Tel. 958 507 360 · Fax 958 507 846
www.distrosur.com



Fabricante


Queisser
PHARMA
D-24914 Flensburg
Germany
www.queisser.com

723233 GB/ES